




## Medicinsk avstängningsventil, AGA. Snabb installation och pålitlig funktion.

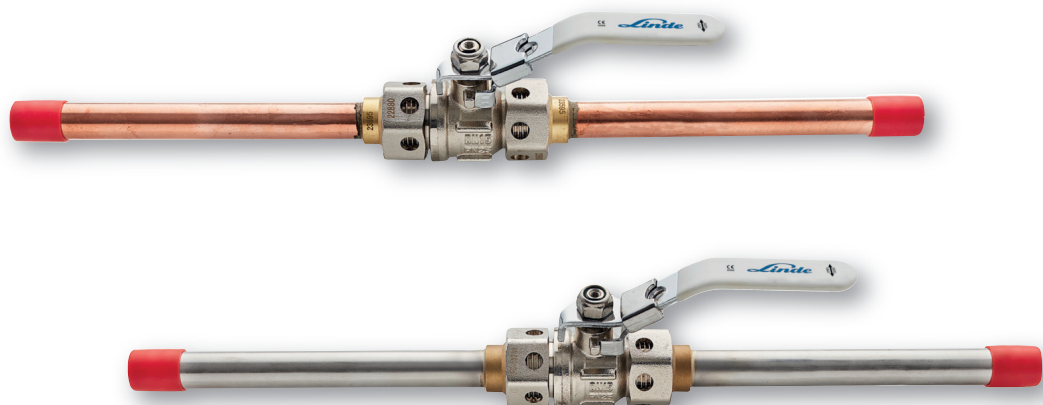

### Produktbeskrivning

- Låsbar avstängningsventil för medicinska gaser samt vakuum med långa koppar alternativt rostfria rörändar.
- Den medicinska avstängningsventilen är avsedd att användas för akuta eller planerade avstängningar vid till exempel service eller ombyggnation.
- Konstruktionen är en kulventil av nickelpläterad mässing med monterade långa rörändar av koppar eller rostfria medicinska rör.
- Ventilen är lätt att byta ut genom att den är monterad med muttrar och O-ringspackning.
- Den långa längden på rörändarna gör att ventilen kan lödas/svetsas utan att skada O-ringspackningen.
- Ventilen levereras med rakt cylindriskt genomloppshål vilket minimerar tryckförlusten.
- Rören är medicinska rör enligt EN 13348, som efter kapning och lödning har rengjorts och renhetstestats.
- Produkten finns från rörstorlek  $\varnothing$  12 mm till  $\varnothing$  108 mm.

### AGA

Det produktsortiment som har tillägget AGA uppfyller de produktkrav som sjukvården i norra Europa har ställt genom standarder, lagar och funktionsönskemål.

### Tydlig funktion

Handtaget är utformat så att det är klart om ventilen är öppen eller stängd. Ventilen är snabbstängande genom 90 graders vridning och kan låsas med hänglås i endera positionen.

### Ren installation

Ventilen levereras med pluggade rörändar samt förpackas individuellt i plastpåsar för att undvika partikelföroreningar. Ventilen är läckagetestad och märkt med batchnummer.

### Regulatoriska krav

Ventilen är CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket är kravet för att få säljas för medicinsk användning. Produkten är producerad under kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 13485 Medicintekniska produkter samt uppfyller kraven i SS EN ISO 7396-1 Medicinska centralgasanläggningar. Ventilen är godkänd för alla typer av medicinska gaser, medicintekniska gaser samt vakuum.

**Teknisk data**

- Maximalt drifttryck: 25 bar (16 bar för Ø 108 mm)
- Försäkran om överensstämmelse: Produkten överensstämmer med medicintekniska direktivet 93/42/EEC samt SS EN ISO 7396-1
- Produktens livslängd: 15 år
- CE-märkning: Medicinteknisk Klass IIa CE 0086.

**Artikelnummer**

Medicinsk avstängningsventil, AGA

Artikelnr.	Benämning	Rör			Byggmått [mm]	Max åtdragnings- moment [Nm]
		Mtrl	Ø [mm]	Gänga		
332292	Medical shut-off valve, 15 mm Cu Tube	Cu	15	¾"	380	30
332294	Medical shut-off valve, 22 mm Cu Tube	Cu	22	1"	510	40
332296	Medical shut-off valve, 28 mm Cu Tube	Cu	28	1¼"	530	44
332282	Medical shut-off valve, 35 mm Cu Tube	Cu	35	1½"	610	56
332283	Medical shut-off valve, 42 mm Cu Tube	Cu	42	1¾"	630	60
332284	Medical shut-off valve, 54 mm Cu Tube	Cu	54	2½"	665	98
332297	Medical shut-off valve, 76 mm Cu Tube	Cu	76	3½"	970	74
332298	Medical shut-off valve, 108 mm Cu Tube	Cu	108	M130x2mm	1 070	116
335209	Medical shut-off valve, 76 Flanged Cu	Cu	76	Fläns	970	74
335210	Medical shut-off valve, 108 Flanged Cu	Cu	108	Fläns	1 070	116
335121	Medical shut-off valve, 12 mm SS Tube	SS	12	¾"	380	30
335123	Medical shut-off valve, 18 mm SS Tube	SS	18	1"	510	40
335124	Medical shut-off valve, 22 mm SS Tube	SS	22	1"	510	40
335125	Medical shut-off valve, 28 mm SS Tube	SS	28	1¼"	530	44
335126	Medical shut-off valve, 35 mm SS Tube	SS	35	1½"	610	56
335127	Medical shut-off valve, 41 mm SS Tube	SS	41	1¾"	630	60
335128	Medical shut-off valve, 53 mm SS Tube	SS	53	2½"	665	98
335129	Medical shut-off valve, 85 mm SS Tube	SS	85	3½"	970	74
335150	Medical shut-off valve, 104 mm SS Tube	SS	104	M130x2mm	1 070	116

Cu = Koppar; SS = Rostfritt stål

**Drift och underhåll**

Ventilerna ska motioneras årligen och kontrolleras med läckagespray.

**QI® Services**

QI Services kallar vi alla de tjänster som Linde kan tillhandahålla runt det medicinska gassystemet. De säkerställer att läkemedlet medicinsk gas når patienten säkert, utan avbrott i enlighet med gällande krav och regler avseende kvalitet. QI står för Quality Improvement.

**Kundcenter****Linde Healthcare kundcenter:**

Linde Healthcares kundcenter svarar på frågor, tar emot beställningar och koordinerar alla leveranser.

Öppettider vardagar 8.00–16.00

healthcare.se@linde.com

Telefon 08-731 18 00

**Linde Gas AB**

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se